


Multidrogová jednokroková testovací nádoba– test z moči

Nechte všechny součásti testu dosáhnout pokojové teploty

PROVEDENÍ TESTU

Odeberte vzorek moči přímo do testovací nádoby a čekejte, až se na zadní straně testovací nádoby objeví zelená barva udávající správnou teplotu vzorku (32-38°C). Zašroubujte víčko a odtrhněte oranžovou etiketu z testovací nádoby. Výsledky odečítejte po 5-10 minutách.

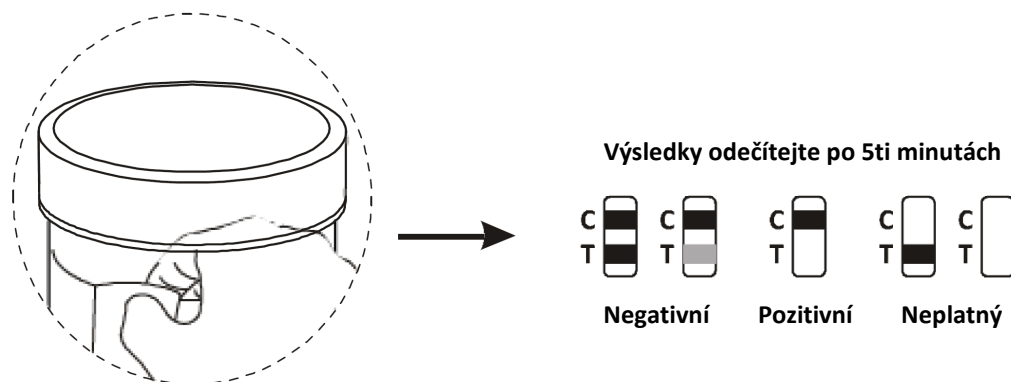

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Objeví se dvě barevné čáry

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Barevná čára se objeví pouze v oblasti kontrolní čáry (C). V oblasti testovací čáry (T) se barevná čára neobjeví.

Upozornění – jakýkoli barevný odstín v oblasti testovací čáry (T) značí negativní výsledek

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: Neobjeví se barevná čára v oblasti kontrolní čáry (C)

